

mis®


MGUIDE Протокол

Выполнение компьютерной томографии при частичной адентии

Для изготовления хирургического шаблона MGUIDE требуется выполнение компьютерной томографии по следующему протоколу:


1.

Рекомендуемый объем исследования челюстей КЛКТ должен составлять 10 см × 10 см;
для крупных людей - 12 см × 12 см и более.

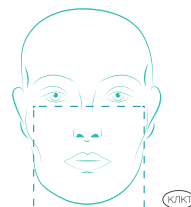


2.

Язык пациента должен касаться примерно передней трети твердого нёба. Щёки и губы должны быть отодвинуты от зубов при помощи ватных стандартных валиков, как правило, по три на челюсть. Также возможно использование оптрагейта.

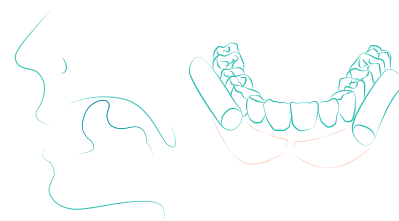

3.

Обязательное разобшение прикуса — КЛКТ делать со стандартным мундштуком. Голова пациента должна быть жестко зафиксирована, исключая движения.

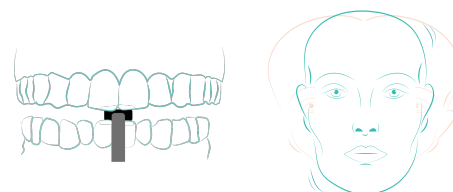


4.

Если пациент пользуется съемными протезами, то они должны быть удалены из полости рта.




5.

На томограмме верхней челюсти должна быть видна, **как минимум**, нижняя треть верхнечелюстной пазухи.

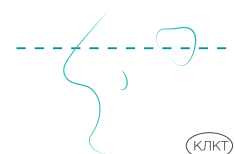


6.

Убедитесь, что на томограмме видна вся челюсть целиком

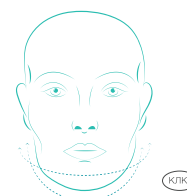

7.

Рекомендованная толщина срезов:
Верхняя челюсть = 0.3 - 0.4мм
Нижняя челюсть = Не более 0.2мм

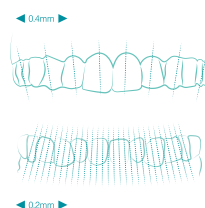

8.

Данные компьютерной томографии должны быть сохранены в многофайловом формате DICOM.

