

Протокол подготовки пациента к изготовлению навигационного шаблона при полной адентии



Для изготовления хирургического шаблона в лабораторию М-КАД необходимо отправить следующие материалы:

1. Заполненный заказ-наряд;
 2. КЛКТ согласно протоколу для полной адентии;
 3. Слепки верхней и нижней челюсти согласно требованиям, описанным в пункте 1 (будет изготовлено все необходимое для получения файлов); или
- Файлы (сканы) верхней и нижней челюсти в форматах STL или PLY, сделанные силами своей лаборатории, следуя протоколу описанному ниже:



1. Снятие слепков силиконовой массой двухслойной с обеих челюстей в полную анатомию как для полного съемного протеза. Должны быть просняты небо, бугры и ретромолярная область.




2. Отлить модели и изготовить прикусные шаблоны на жестком базисе из светоотверждаемого материала с полным прилеганием базиса к моделям.



3. Определить центральное соотношение челюстей, сделав четкие метки на воске для соединения шаблонов. Отметить центральную линию, линию клыков и линию улыбки.



4. Снять слепки индивидуальными ложками коррегирующей массой.

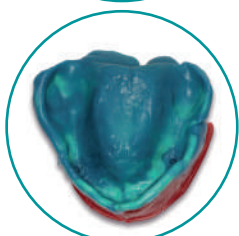

5. Нанести на вестибулярной поверхности восковых шаблонов жидкотекучий композит в виде капель около 2 мм равномерно 5-6



6. Сделать КЛКТ с прикусными шаблонами на жестком базисе с коррекцией и метками из жидкотекучего композита. Щеки и губы отодвигать не обязательно. Челюсти в сомкнутом состоянии на шаблонах.

7. Отлить модели по индивидуальным ложкам с цоколем не менее 1 см. Не снимая с моделей соединить с антагонистом и начать сканирование моделей:
сначала прикус - далее модели с прикусными шаблонами на жестком базисе - далее модели - далее отдельно отсканировать прикусной шаблон на жестком базисе и **все в одной оси координат и в одном заказе.**

Этапы 2 и 7 можно выполнить в лаборатории